


Todos os benefícios do 7 Fr sem a necessidade de atualização de console.

Através de um design superior, o cateter Ultra Inshigtra de 7 Fr permite um alto desempenho com alta tecnologia, sem comprometer seu lúmen.

Este é um genuíno cateter 7 Fr (incluindo o balão) ou seja, inserido através de um introdutor 7 Fr.

7 Fr significa uma redução de 23% em área de secção transversal (vs 8 Fr), o que resulta em mais de 20% do fluxo sanguíneo otimizado em uma artéria distal femoral de 4,0 milímetros.¹

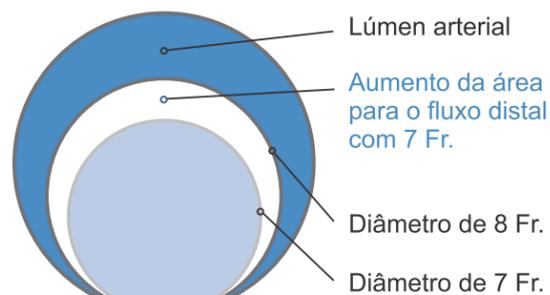

(Desenho sem escala)

Menor área de secção transversal em comparação com um de 8 Fr, que permite um melhor fluxo distal

Consoles compatíveis

Datascope

| | |
|---------------|------------------|
| System 97, 98 | ACAT, AutoCat, |
| 98XT | AutoCat 2, |
| CS100, CS300 | AutoCat 2, Wave, |

Mantendo esta tecnologia significa que os cateteres Inshigtra Ultra 7 Fr podem ser usados na maioria dos consoles, bem como os últimos sistemas de operação, com isso não há necessidade de atualizar o seu console.


Atingindo o desempenho de 8 Fr em um cateter de 7 Fr

Sem comprometer: BIA Ultra Inshigtra 7 Fr pode fornecer os tempos de resposta comparáveis a um BIA de 8 Fr em um cateter de diâmetro de 7 Fr - permitindo aos pacientes um benefício de um perfil menor na inserção e alto desempenho na aorta.

Preocupação com o design. O Ultra BIA Inshigtra foi projetado desde o início como um dispositivo de 7 Fr com:

- Paredes finas e fortes para maximizar a área de transporte de gás.
- Espaçoso lúmen central de 0,028", permitindo um fio guia de 0,025" para garantir a entrega suave e melhor transmissão no sinal de pressão.
- Balão de poliuretano fino e forte, que permite tempos de resposta mais rápidos.

Resposta e performance de 8 Fr em um dispositivo de 7 Fr²

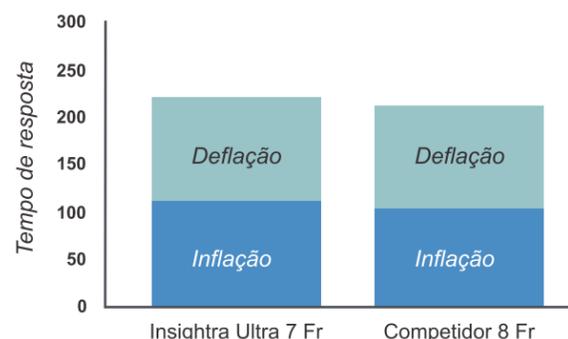

Tecnologia V-HUB patenteada


Projetado para melhoria das taxas de fluxo de gás, permitindo que o ritmo de gás seja mais rápido na performance clínica desempenho

A gama mais completa dos Cateteres BIA 7 Fr

Acreditamos que todos os pacientes merecem os méritos da tecnologia 7 Fr. Para esse fim, oferecemos a mais completa linha de cateteres 7Fr.

Em pacientes pequenos e com a luz do vaso reduzida, torna-se ainda mais crítico usar o volume do balão adequado. Por isso oferecemos, 30 cc, 25cc e 20cc em 7 Fr verdadeiros.

Combine uma gama completa de cateteres com a flexibilidade de usalos no mais antigo ou mais novos sistemas de consoles, com os benefícios da Terapia 7 Fr agora disponível para uma ampla gama de pacientes.

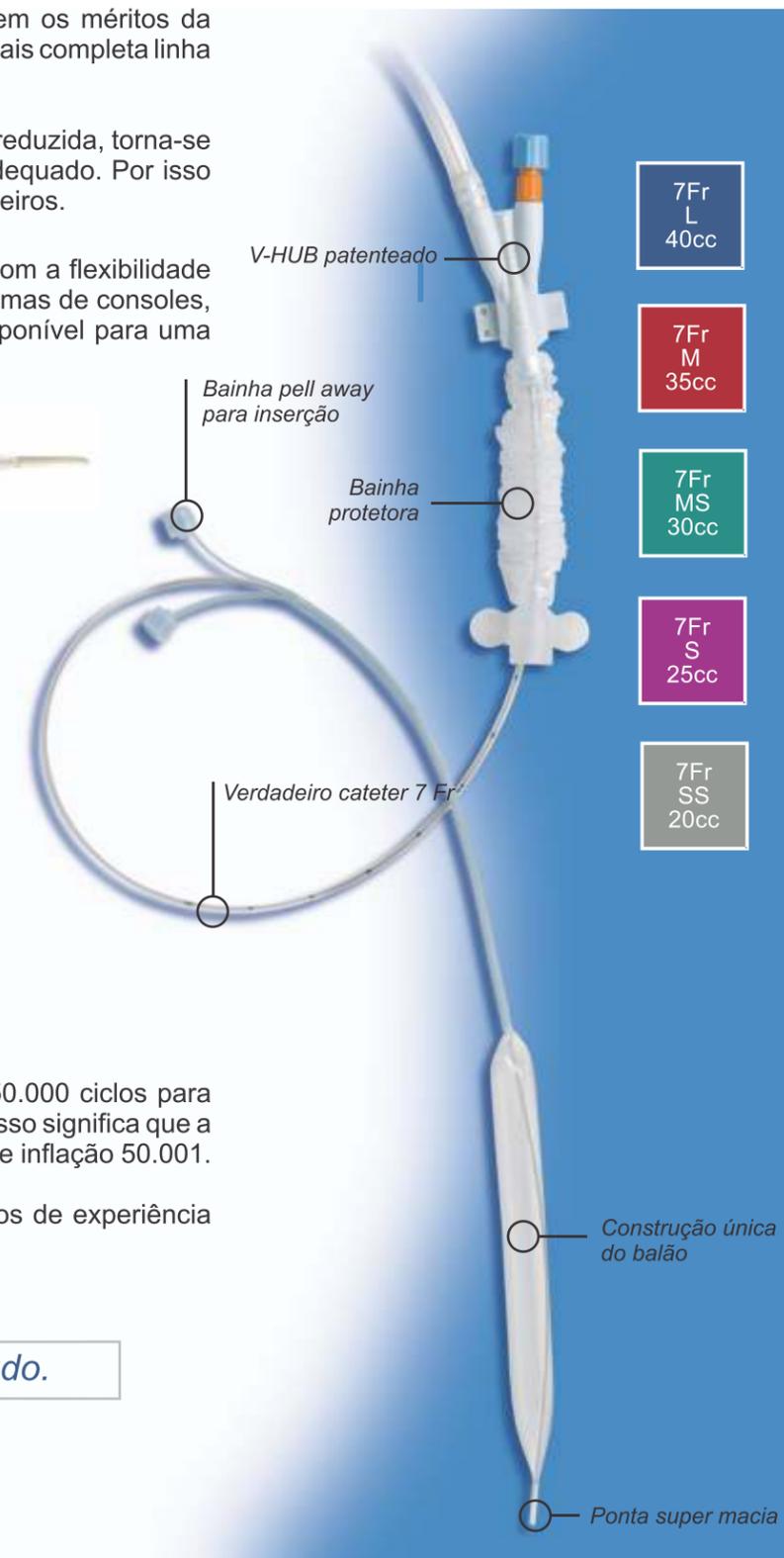

Qualidade de seus pacientes pode depender:

Nós testamos **cada** balão que fabricamos antes ser embalado. Cada balão que fazemos passa por rigorosos procedimentos de fabricação e teste.



Todos os balões passam por um teste de 50.000 ciclos para garantir que cada componente seja trabalho. Isso significa que a primeira inflação no paciente seja o número de inflação 50.001.

O Ultra BIA Inshigtra 7 Fr é baseado em anos de experiência clínica em milhares de pacientes.

Qualidade, **centro** de tudo.

(1) Based on theoretical model by Ohley et. al.; data on file
(2) Matsuda et. al.-Jpn J Interv Cardiol: 2006 21: 82-87

Kit do Balão Intra Aórtico

| Especificações | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Tamanho do balão | 7Fr L 40cc | 7Fr M 35cc | 7Fr MS 30cc | 7Fr S 25cc | 7Fr SS 20cc |
| Capacidade volumétrica | | | | | |
| Altura do paciente | 165cm ou Mais | 165 - 155cm | 155 - 145cm | 145cm ou Menos | |
| Comprimento total do balão | 255mm | 225mm | 195mm | 180mm | 170mm |
| Diâmetro externo do balão | 14.5mm | | | 13.5mm | |
| Diâmetro do cateter | 7Fr | | | | |
| Fio guia compatível | 0.025 polegadas (0.635mm) | | | | |
| Diâmetro do lúmen central | 0.028 polegadas (0.715mm) | | | | |
| Comprimento efetivo | 700mm | | | | |
| Número do modelo | IMU7F-40 | IMU7F-35 | IMU7F-30 | IMU7F-25 | IMU7F-20 |
| Conteúdo do kit | | | | | |
| Plataforma principal | Cateter balão com seringa de 60cc, válvula unidirecional | | | | |
| Acessórios | Fio-guia 0,025 polegadas x 150 centímetros | | | | |
| | Fio-guia 0,035 polegadas x 50cm | | | | |
| | Agulha de inserção 18G | | | | |
| | Dilatador e bainha 7 Fr | | | | |
| | Tubulação de controlo da pressão: 15cm e 90cm | | | | |

Compatível com Console Datascope e Arrow



ULTRA - BIA

Balão Intra Aórtico - Kit Cateter 7 Fr.



INSIGHTRA
MEDICAL

9200 Irvine Center Drive, Ste. 200
Irvine, CA 92618 USA • www.insightra.com

© 2010 Inshightra Medical Inc. USA,
owned by their respective companies



Distribuído por:
CMS Produtos Médicos Ltda.
Filial: Rua Sampaio Viana, 202
Conjunto 113 - Paraíso
CEP: 04.004-000
São Paulo - SP - Brasil
Fone: +55 (11) 2125-8900
www.cmsmedical.com.br
pedidos@cmsmedical.com.br



Part number:
DO2-0037-001 Rev. D

INSIGHTRA
MEDICAL